

NOS PREOCUPAMOS POR SU AUDICIÓN.

Soluciones innovadoras para
diagnóstico auditivo y seguimiento.



THE SOUND OF SCIENCE.





**Una audición excelente capta todos los sonidos.
Una tecnología excelente capta el silencio.**

Tecnologías que dejan huella.

La capacidad de oír es uno de nuestros sentidos más preciados. Para quienes formamos parte de PATH MEDICAL, es también el más fascinante. Desde nuestra temprana edad, oír como manera de percibir el mundo tiene un profundo efecto en el desarrollo del lenguaje y nuestra capacidad para aprender. En los adultos mayores, influye en la manera en que funciona la memoria. Muchos tipos de trastornos auditivos pueden curarse o tratarse si se detectan a tiempo.

PATH MEDICAL desarrolla soluciones innovadoras que simplifican el diagnóstico auditivo para todos los grupos etarios y de riesgo. Con estas soluciones, patologías fisiológicas, que más adelante podrían solamente tratarse parcialmente o con dificultad, pueden prevenirse desde una etapa temprana.

Desde 2007, el equipo altamente calificado de expertos de PATH MEDICAL, que incluye científicos experimentados e investigadores jóvenes, ha venido desarrollando nuevos métodos y tecnologías para evaluar el funcionamiento de la audición en sus distintas etapas. El uso de los más avanzados métodos de medición permite un diagnóstico confiable de trastornos auditivos. Estos métodos incluyen timpanometría, otoemisiones acústicas, potenciales evocados auditivos, audiometría tonal, pruebas de inteligibilidad del lenguaje, screening auditivo y pruebas audiológicas para medicina ocupacional. Además, el software pathTrack de PATH MEDICAL asegura un seguimiento confiable para todos los recién nacidos en programas de screening auditivo en todo el mundo.

En la actualidad, PATH MEDICAL está considerado entre los líderes en innovación en el campo de soluciones auditivas – con ciencia hecha en Alemania.



Dr.-Ing. Hans Oswald



Dr.-Ing. Andre Lodwig

Grandes innovaciones en formato compacto.

SENTIERO

SENTIERO combina métodos de prueba fisiológicos con métodos de prueba psicoacústicos: audiometría tonal y logaudiometría, TEOAE, DPOAE, potenciales evocados (incluyendo ABR, ASSR, ECoG, eABR y VEMP) y timpanometría, lo que lo hace especialmente apto para diagnóstico de screening neonatal conformacional, diagnóstico neurológico y estimación objetiva de umbrales. Esto le permite al usuario flexibilidad acorde a las necesidades del paciente.

SENTIERO es fácil de usar con una interfaz multilingüe optimizada. ¡El menú que orienta la navegación y protocolos flexibles garantizan menor tiempo de prueba!

La versión de escritorio también mantiene la portabilidad de SENTIERO, combinando módulos de prueba standard en un mismo instrumento.

**SENTIERO combina
métodos de prueba
fisiológicos con métodos de
prueba psicoacústicos**



nanoTym

nanoTym es el primer timpanómetro de screening con base en PC, con software compatible con la mayoría de los sistemas operativos. Esto permite resultados comprobados y confiables de manera económica.

Desde pacientes pediátricos a adultos, nanoTym es una herramienta invaluable para verificar y diagnosticar patologías del oído medio.

SENTI

SENTI incluye todas las pruebas psicoacústicas y fue desarrollado con ilustraciones fáciles de entender para el screening auditivo de niños en edad preescolar, de 2 a 5 años. El SENTI DESKTOP, como audiómetro diagnóstico, permite investigaciones avanzadas de trastornos de procesamiento auditivo en niños y adultos como así también screening de habla en ruido y diagnóstico con pruebas de logaudiometría con base en imágenes.

Liderazgo en tamizaje auditivo neonatal y seguimiento



QSCREEN

PATH MEDICAL ha desarrollado QSCREEN con precisión para satisfacer sus necesidades esenciales en screening auditivo neonatal con eficiencia, exactitud y fiabilidad.

QSCREEN provee el diseño y rendimiento más avanzados para screening auditivo con ABR y OAE, como resultado de más de 20 años de experiencia, al haber examinado millones de recién nacidos en todo el mundo.

QSCREEN con su nueva sonda para OAE estilizada con cancelación de ruido, pantalla táctil capacitiva, base de conexión computarizada, conectividad inalámbrica, software flexible y personalizable QLINK, es el equipo de screening con OAE y ABR más avanzado en el mercado en la actualidad.

PATHTRACK

¿Cómo encontrar y realizar el seguimiento de hasta 3.000 de cada 1.000.000 de recién nacidos para comenzar la terapia dentro de los seis meses?

PATH MEDICAL ofrece un sistema de seguimiento a largo plazo, confiable y eficiente, para el screening auditivo preescolar y neonatal. El sistema PATHTRACK permite tamizaje con control de calidad y seguimiento, y provee datos con base en evidencia para la evaluación de la eficacia del programa.

En regiones con acceso limitado a expertos en salud, PATHTRACK ofrece una solución completa para procedimientos de telemedicina y permite el análisis estadístico de todos los datos registrados. ¡Puntos de referencia y medicina con base en la evidencia ya no son un sueño!

¡Puntos de referencia y medicina con base en la evidencia ya no son un sueño!

Las soluciones de PATH MEDICAL

Nuestra cartera de productos ofrece una amplia gama de configuraciones que se adaptan a todas las necesidades – para audiolología y otorrinolaringología como así también para screening escolar, medicina general, diagnóstico neonatal y Potenciales Evocados / Otoemisiones Acústicas

ABR / ASSR



SENTIERO
// ADVANCED

OAE



SENTIERO
// SCREENING

Timpanometría

SENTIERO
// TYP DIAGNOSTIC



Audiometría



SENTI
// DESKTOP FLEX

SCREENING CON OAE Y ABR



QSCREEN

Seguimiento y telemedicina



PATHTRACK

Todo en un solo instrumento para OAE, ABR, ASSR y Audiometría



¡Con TE,
DPOAE, ABR y
ASSR!

Por primera vez un equipo de mano, portátil y liviano, combina audiometría tonal y logaudiometría, TEOAE, DPOAE, PEA (ABR, ASSR, ECochG, VEMP y eABR) y timpanometría en un formato modular seleccionable.

El énfasis está puesto en la flexibilidad de las pruebas, facilidad de uso, diagnóstico confiable y tiempo reducido de prueba.

Los módulos de prueba binaural se utilizan habitualmente para diagnóstico conformacional neonatal, diagnóstico neurológico y evaluación objetiva de umbrales.

Ventajas del producto

- Pantalla táctil en color fácil de utilizar
- Control remoto para modo de operación híbrido – desde la pantalla táctil del equipo o desde la PC
- Portabilidad
- Funciona con la red eléctrica o con baterías recargables de larga vida (10 horas), se carga completamente en 4 horas
- Amplia memoria (guarda más de 1000 pruebas)
- Capacidad diagnóstica y de screening
- Extremadamente rápido gracias a su tecnología de avanzada y métodos patentados
- Pruebas objetivas y subjetivas en un mismo equipo
- Configurable para ofrecer la opción de uno o varios módulos de prueba
- El modo demo permite total acceso a todos los módulos sin cargo por tiempo limitado
- ¡La opción de combinar ASSR y DPOAE de estimación de umbrales auditivos permite realizar un audiograma completo desde 125 Hz hasta 8 kHz con un procedimiento objetivo y totalmente automatizado!
- Integración transparente al sistema NOAH


¡La solución completa para su
clínica audiológica!



Especificaciones técnicas de ABR / ASSR

- ABR binaural, con estímulo click, chirp y tone burst de frecuencia específica, modo tasa
- Polaridad: condensación, rarefacción, alternante, C/R trazas separadas
- Tipo de estímulo seleccionable por el usuario con niveles hasta 120 dB peSPL
- Hasta 10 niveles de estimulación/curvas por secuencia de prueba
- Tasa de estimulación: 10 Hz a 90 Hz
- La tecnología de espectro expandido provee resultados más rápidos y confiables
- Ventana de registro: 0 a 30 ms
- Ancho de banda de registro: ancho de banda de registro de ABR: 80 Hz a 2 kHz; ASSR; 15 Hz a 2 kHz
- Tasa de muestreo: 16 kHz
- El módulo ABR de screening incluye estímulos chirp con niveles de 25 a 55 dB eHL
- ASSR: frecuencias de modulación: 40 y 80 Hz, modulación multi-tasa, niveles de estimulación: hasta 100 dB HL, hasta 4 frecuencias de prueba por oído simultáneamente – tiempo máximo de promediación, umbral de artefacto y nivel de relevancia ajustables.
- Desempeño destacado gracias al algoritmo de promediación ponderada para diferentes condiciones ambientales
- Modo de operación robusto, filtro digital automático 50/60 Hz
- Análisis directo de curvas utilizando marcadores de ondas automatizados
- Opciones adicionales de análisis luego del registro y luego de la transferencia de datos del instrumento al software MIRA para PC

Especificaciones técnicas de eABR

- Ingreso de nivel del disparador TTL desde el sistema de adaptación de implantes cocleares
- Resolución del disparador 20 μ s
- Tasa del disparador 10 – 100Hz
- Ancho de banda de registro: 10 Hz a 2 kHz
- Hasta 15 trazas por prueba
- Interruptores de traza automático al poner el disparador en pausa
- Alisado de curvas opcional
- Escala de gráfico configurable

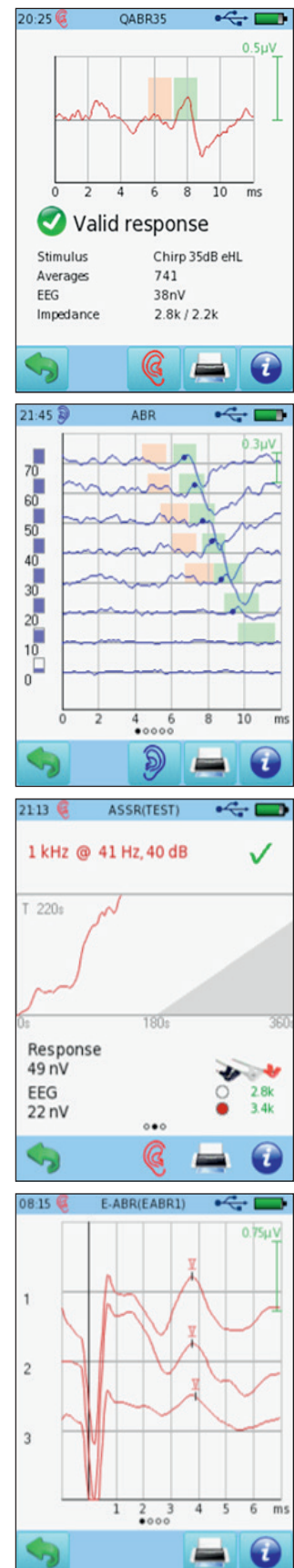

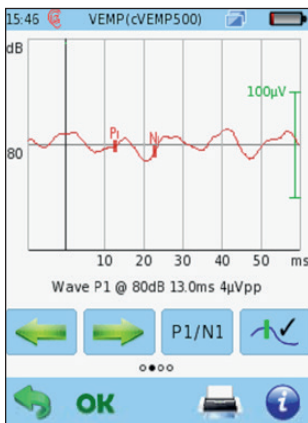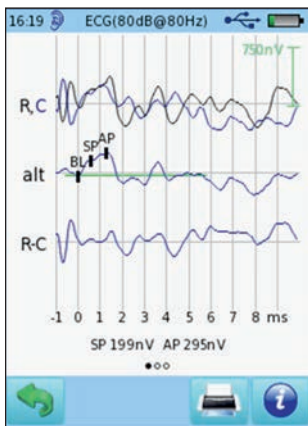

Especificaciones técnicas de ECoG

- Visualización de trazas alternante, condensación y rarefacción
- Click y toneburst configurables
- Tasa de estimulación 8 a 100Hz
- Ancho de banda de registro: 10Hz a 2kHz
- Hasta 15 trazas por prueba
- Edición y evaluación intuitiva de las curvas
- Selección de auriculares o auriculares de inserción
- Promediación ponderada rápida
- Espectro expandido (SP2) opcional

Especificaciones técnicas de VEMP

- cVEMP y oVEMP
- Estimulación por vía aérea y vía ósea
- Monitoreo de EMG
- 5 protocolos preconfigurados para cVEMP y oVEMP
- Estímulo click, chirp y toneburst
- Toneburst configurable: frecuencias desde 500 Hz hasta 4 kHz, ventana lineal o blackman, diferente duración para subida, meseta y bajada.
- Polaridad: Condensación, rarefacción, alternante, aleatoria, opción de invertir la polaridad de la traza del oído derecho
- Nivel de estimulación: 20 – 95 dBHL, incrementos de 5 dB
- Tasa de estimulación: 2 – 10 Hz, resolución 0.1Hz
- Promediaciones: 20 – 500. Rango de gráfico hasta 100 ms
- Etiquetado de trazas con texto libre
- Escala de EMG y cálculo de amplitud automáticas en software para PC
- Comparación en paralelo de cualquier medición de oído derecho e izquierdo en software para PC



Ahora puede agregarse timpanometría de screening y diagnóstico al Sentiero Advanced con el accesorio TY-MA

Detalles OAE: ver páginas 10 y 11
 Detalles timpanometría: ver página 12
 Detalles audiometría: ver página 14
 Para mayor información visite nuestro sitio de Internet: www.pathme.de

EMISIONES OTOACÚSTICAS en el equipo SENTIERO


Para el diagnóstico auditivo de bebés prematuros, de riesgo o recién nacidos es esencial utilizar todas las opciones diagnósticas posibles teniendo a la vez la comodidad y la simplicidad de un equipo portátil.

Estudios epidemiológicos recientes muestran un aumento significativo de trastornos auditivos en niños. La demora en la adquisición del lenguaje es una de las dificultades de desarrollo neurológico más comunes en la infancia temprana.


La detección temprana de los trastornos auditivos es fundamental para tratarlos a tiempo. Las pruebas de screening auditivo preescolar están diseñadas para proveer información con mayor especificidad de frecuencia y cuantitativa sobre la pérdida auditiva

Especificaciones técnicas de Otoemisiones Acústicas

- Pueden medirse OAE simultáneamente en ambos oídos
- Modos de prueba DPOAE Rápido/Diagnóstico
- Rango de frecuencias: 800 Hz a 10 kHz, alta resolución hasta 30 puntos por octava
- Estimulación multifrecuencia y FMDPOAE™ (DPOAE con modulación de frecuencia) permiten ahorrar tiempo
- Estimación de umbrales auditivos con DPOAE (patentado) – audiograma coclear automatizado hasta 50 dB HL
- Niveles de estimulación desde 15 dB HL hasta 65 dB HL
- Modos de prueba TEOAE Rápido/Diagnóstico: 0,7 a 4 kHz
- Prueba rápida/diagnóstica con bandas de media octava, con varias opciones de SNR y criterios de detención

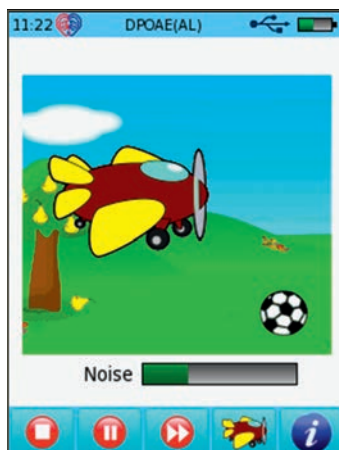

Modo historieta para pruebas en niños

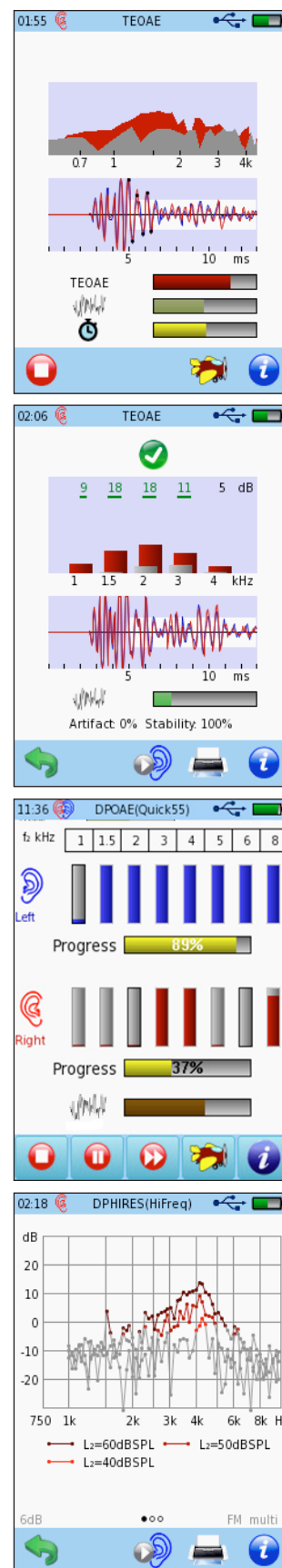

La combinación para screening con OAE y audiometría tonal más rápida y confiable



El equipo SENTIERO para screening permite examinar de manera sencilla y eficiente a pacientes de todas las edades desde recién nacidos hasta adultos con una pantalla táctil intuitiva y la exclusiva tecnología para hacer pruebas multi frecuencia (dos frecuencias simultáneamente), que permite ahorrar tiempo. FMDPOAE™ patentado provee una mejor amplitud de señal para resultados rápidos y robustos


Especificaciones técnicas de Otoemisiones Acústicas de screening

TEOAE

- Nivel de estimulación: 85 dB peSPL
- Rango de frecuencias: 0,7 a 4 kHz.
- Rechazo de artefactos: promediación ponderada
- Tasa de muestreo: 48 kHz (estímulo), 16kHz (respuesta)
- Ventana de análisis: 5 a 13 ms posterior al estímulo
- Protocolo de estimulación: no lineal

DPOAE

- Frecuencias f2: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kHz
- Nivel de estimulación L2: 30 a 65 dB SPL, incremento: 5 dB
- Razón L2/L1: automática (paradigma de la tijera: $L1 = 0.4 L2 + 39 \text{ dB SPL}$, Kummer et al. 1998)
- Criterio de detención SNR: 6, 9, 12 dB
- Criterio de detención general: x de y (siendo y = número de frecuencias seleccionadas, $x = y/y-1/y-2$ y $x > y/2$) con opción "lo más rápido posible", es decir detener en cuanto se haya logrado el criterio general o ya no pueda alcanzarse
- Número máximo de recalibraciones antes de detener la prueba: 0, 1, 3, 10
- Repetir la prueba manualmente

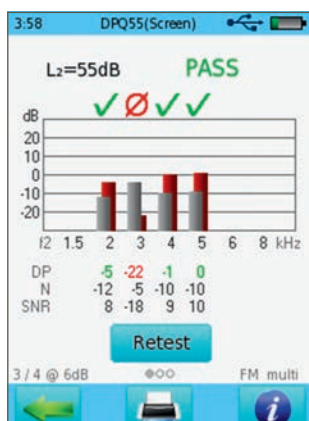

Para mayor información visite nuestro sitio de Internet:
www.pathme.de

El primer equipo en el mundo en combinar OAE, Timpanometría y Audiometría en un mismo instrumento

SENTIERO DESKTOP es un equipo clínico potente y multifuncional para la evaluación del oído medio (IMP), otoemisiones acústicas (DPOAE y TEOAE), audiometría tonal y logaudiometría.



Al utilizar timpanometría multifrecuencia, SENTIERO DESKTOP provee mejor sensibilidad y especificidad para las patologías del oído medio como así también la posibilidad de realizar pruebas de eSRT.

Clase 1: diagnóstico



Especificaciones técnicas de Timpanometría y Reflejos Acústicos

- Timpanometría multifrecuencia con gráficos 3D
- Frecuencias: 226 Hz, 678 Hz, 800 Hz y 1000 Hz
- Nivel: 69 dB HL
- Protocolos configurables para diagnóstico y screening
- Rango de presión : -600 a +400 daPa (-300 a +200 daPa para clase 2)
- Tasa de cambio de presión: 50, 100, 150, 200 daPa/s, lo más rápido posible
- Rango: 0,1 a 8,0 ml con tono de sonda 226 Hz y 0,1 a 15 mmho con tonos de sonda 678, 800 y 1000 Hz
- Visualización de componentes Y, B, G
- Pruebas de función tubárica: tímpano perforado y no perforado, disfunción tubárica
- Reflejos acústicos multifrecuencia
- Tono de reflejo acústico – Ipsi/Contra: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz, Ruido (LP, HP, BB)
- Prueba automática de umbral de reflejo y decay del reflejo

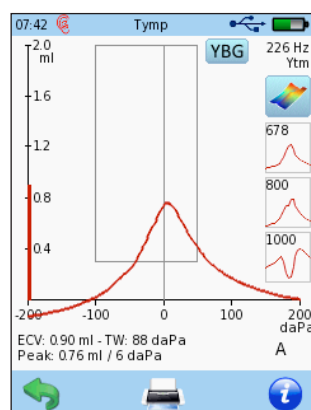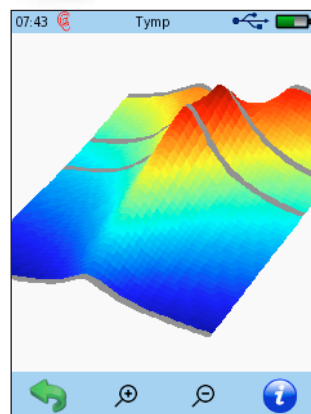

Detalles OAE: ver páginas 10 y 11

Detalles audiometría: ver página 14

Para mayor información visite nuestro sitio de Internet: www.pathme.de

Timpanometría simplificada para Windows, Android, MAC

nanoTymp es el timpanómetro de screening con conexión USB más pequeño y más versátil del mundo. Este equipo económico y fácil de usar es adecuado para pacientes pediátricos o adultos, gracias a su capacidad de realizar pruebas de manera sencilla y rápida.

Incluye timpanometría clase 2 y reflejos acústicos ipsilaterales. Puede agregarse tono de sonda de 1000Hz como opción para pruebas en niños.



Características standard


- Cable de sonda extra largo
- Tono de sonda 226Hz
- Frecuencias de reflejo ipsilateral 500Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, BBN
- Protocolos configurables
- Módulo NOAH
- Almacenamiento ilimitado de datos (sujeto a capacidad de la PC)

Características opcionales

- Tono de sonda 1000Hz

¿Qué se incluye?

- Cordón para prueba con manos libres
- Manual del usuario
- Clip para la sonda
- Cavidades de calibración
- Software para nanoTymp en USB
- Kit de olivas con puntas de sonda

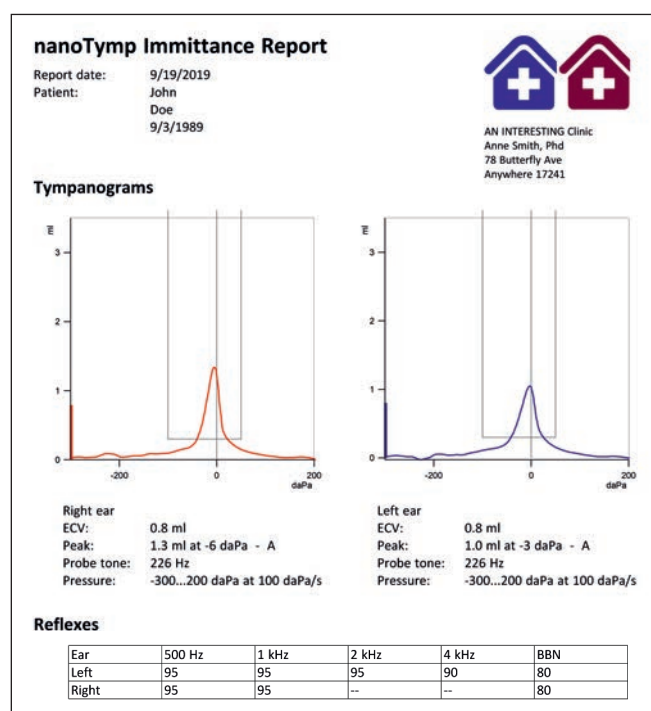

Audiometría y Logaudiometría, convencional y con base en imágenes en UN instrumento

SENTI DESKTOP FLEX es un audiómetro portátil y autónomo, que funciona con baterías. Incluye una pantalla táctil a color fácil de usar, compatibilidad con NOAH y perfecta integración con EMR.

Con un peso de solamente 0,5 kg, tiene capacidad de memoria para 1000 pruebas y puede imprimir directamente a PDF en la computadora, o a una de las impresoras de etiquetas disponibles.



Características del producto

- Pantalla táctil a color de 5", de fácil uso
- Carcasa para escritorio estable
- Interface con PC mediante USB
- Memoria incorporada para pruebas de habla especializadas
- Soporte en varios idiomas
- Asistencia incorporada con información disponible en el equipo
- Comunicación con el paciente/pruebas de habla en vivo con micrófono tipo cuello de cisne
- Base de datos que permite almacenar hasta 1000 resultados de pruebas
- Impresión directa a impresora de etiquetas o pdf
- ¡Agregue pruebas cuando lo desee!

Módulos de prueba

- Frecuencias desde 125 Hz hasta 16 kHz (opción con DD 450)
- Niveles desde -10 hasta 110 dB HL en incrementos de 5 dB
- Varias opciones de accesorios: DD45, DD450, B81, campo libre, auriculares de inserción, botón de respuesta del paciente
- Conducción aérea y ósea con enmascaramiento
- Audiometría tonal automática
- Audiometría de screening y de diagnóstico
- Opciones de audiometría por juego (MAGIC, MATCH, BASD, logaudiometría ¡y muchas más!)

Opcionales

MAGIC - MATCH - SUN - BASD -
LOGOaudiometría - ALTA FRECUENCIA



Especificaciones técnicas	Modelo 100470-SC	Modelo 100470
Rango de nivel de audición (AC)	-10 a 110dB en incrementos de 5 dB	-10 a 110dB en incrementos de 5 dB
Rango de nivel de audición (BC)	X	B71 hasta 60 dB, B81 hasta 80 dB
Estímulo tonal	Sinusoide, sinusoide pulsado, warble	Sinusoide, sinusoide pulsado, warble
Rango de frecuencia	125 a 8000 Hz	125 a 8000 Hz
Conducción aérea y ósea	Solamente aérea	Conducción aérea y ósea
Opción de alta frecuencia	X	Hasta 16 kHz con módulo de alta frecuencia
Ruido de enmascaramiento	X	Ruido de 1/3 de octava
Prueba automática	X	Békésy y Hughson-Westlake
Nivel de incomodidad	X	Disponible en modo experto
Audiograma bilateral	X	Disponible en modo experto
Pantalla	LCD 5" color, 240 x 320 pixel	LCD 5" color, 240 x 320 pixel
Capacidad de memoria	Hasta 1000 resultados de pruebas	Hasta 1000 resultados de pruebas
Dimensiones del equipo	150 x 210 x 45 mm	150 x 210 x 45 mm
Peso del equipo	475 g	475 g
Consumo de energía	2 W	2 W
Standards	DIN EN 60645-1	DIN EN 60645-1

El diseño y rendimiento más avanzados para screening auditivo con ABR y OAE



QSCREEN provee el diseño y rendimiento más avanzados para screening auditivo con ABR y OAE, como resultado de más de 20 años de experiencia, al haber examinado millones de recién nacidos en todo el mundo.

Ventajas del producto

- Nueva sonda para OAE estilizada con cancelación de ruido
- Pantalla táctil capacitiva
- Base de conexión computarizada
- Lector de código de barras incorporado
- Software QLINK flexible y personalizable
- Impresión y carga inalámbricas
- Conexión inalámbrica a pathTrack mediante modem
- Transmisión inalámbrica a la base de conexión mediante Bluetooth

Perfil versátil de screening con OAE

- Screening con TEOAE y DPOAE
- El equipo más rápido para pruebas de DPOAE con screening de DPOAE multifrecuencia, que duplica la velocidad de las pruebas de DPOAE convencionales sin perder precisión
- DPOAE con modulación de frecuencia (FMDPOAE)®, tecnología patentada por PATH que reduce los efectos de la "estructura fina" lo que disminuye potencialmente los referidos y produce una respuesta de DPOAE más estable

Nueva sonda para OAE estilizada con cancelación de ruido



Screening con ABR sin sedación

- Se ajusta a las necesidades de registros de ABR automatizado rápidos y confiables
- Configuraciones flexibles para ABR que pueden adaptarse para cumplir con los protocolos de su programa regional de screening auditivo neonatal.
- Prueba de ABR de screening con selección de transductores: sonda, acopladores de oído y auriculares de inserción

Soluciones inteligentes para seguimiento y telemedicina



pathTrack es una solución especializada, lista para usar, que utiliza software diseñado para optimizar la gestión de programas de screening. Incorpora tecnología 3G inalámbrica para transmitir información de manera bidireccional entre los equipos y el servidor central.

El programa puede utilizarse en cualquier ubicación sin necesidad de realizar ningún cambio en las infraestructuras de IT existentes en el hospital. Esto permite un sistema de seguimiento con control de calidad para ayudar a gestionar los programas de screening auditivo neonatal y reducir el número de pacientes que no retornan para el seguimiento. Todos los datos se transmiten con encriptación SSL, que ofrece el más alto nivel de seguridad.

Screening
preescolar

Screening
auditivo
neonatal

Telemedicina

Software de seguimiento pathTrack

**Solución inteligente con transmisión
de datos bidireccional**

Ventajas del producto

- No hay conflictos con la red de IT local y el sistema de información del hospital
- Listo para usar, no necesita mantenimiento
- Los equipos de reemplazo reciben inmediatamente todos los parámetros existentes
- Conexión directa y con encriptación entre el equipo y el servidor que recibe los datos
- No se necesitan subsistemas para transmisión, puede almacenarse localmente en el software Mira para PC
- Las actualizaciones de firmware y cambios de configuración se realizan automáticamente (sin gastos de viaje)
- Actualización simple cambiando los datos del examinador
- Gestión de sitios e instalaciones
- Equipos en préstamo para servicio y mantenimiento anual (el centro de seguimiento maneja la información de intervalo de servicio)
- Recibo de recepción en la estación remota
- Visualización de potencia de conectividad y señal
- Duración de la transmisión aprox. 10 segundos
- Funciona en todas partes, "listo para usar" similar a un teléfono inteligente

¿Por qué transmisión en ambos sentidos?

El intercambio de datos bidireccional permite que el sitio central de informes (por ej. el centro de seguimiento) configure los equipos remotamente sin ajustes locales. No hace falta viajar a sitios alejados – ¡los equipos se actualizan remotamente! Con frecuencia se necesitan cambios a los equipos/protocolos, por ej. al cambiar un examinador o los datos del examinador, después de cambios generales de comentarios predefinidos o actualizaciones del firmware.




En el campo de la telemedicina el sistema permite el análisis central a cargo de expertos. Incluso para mantenimiento y servicio el equipo en préstamo recibe inmediatamente la configuración del equipo en uso. Mediante el pathTrack. ClientConfigurator se crean todas las configuraciones y se distribuyen centralmente. Esto simplifica el trabajo diario para el usuario del equipo y para el centro de seguimiento.

Software MIRA

La máxima flexibilidad incluye control remoto y completa integración de datos


Principales funciones

- Importar datos de resultados de pruebas de pacientes y exportar datos de pacientes y configuraciones al equipo mediante USB
- Integración completa con NOAH
- Varias opciones de formatos para informes, impresos y exportación
- Funciones de búsqueda para gestión de usuarios y gestión de pacientes
- Configuración del equipo y actualización de firmware
- Ver, comparar, agregar comentarios, imprimir resultados de pruebas
- Archivar y realizar copias de seguridad
- Función de control remoto que permite controlar la prueba desde la PC
- Potentes opciones de análisis y manejo de resultados de pruebas
- MIRA Direct Print genera un informe pdf inmediatamente desde el equipo mediante USB.

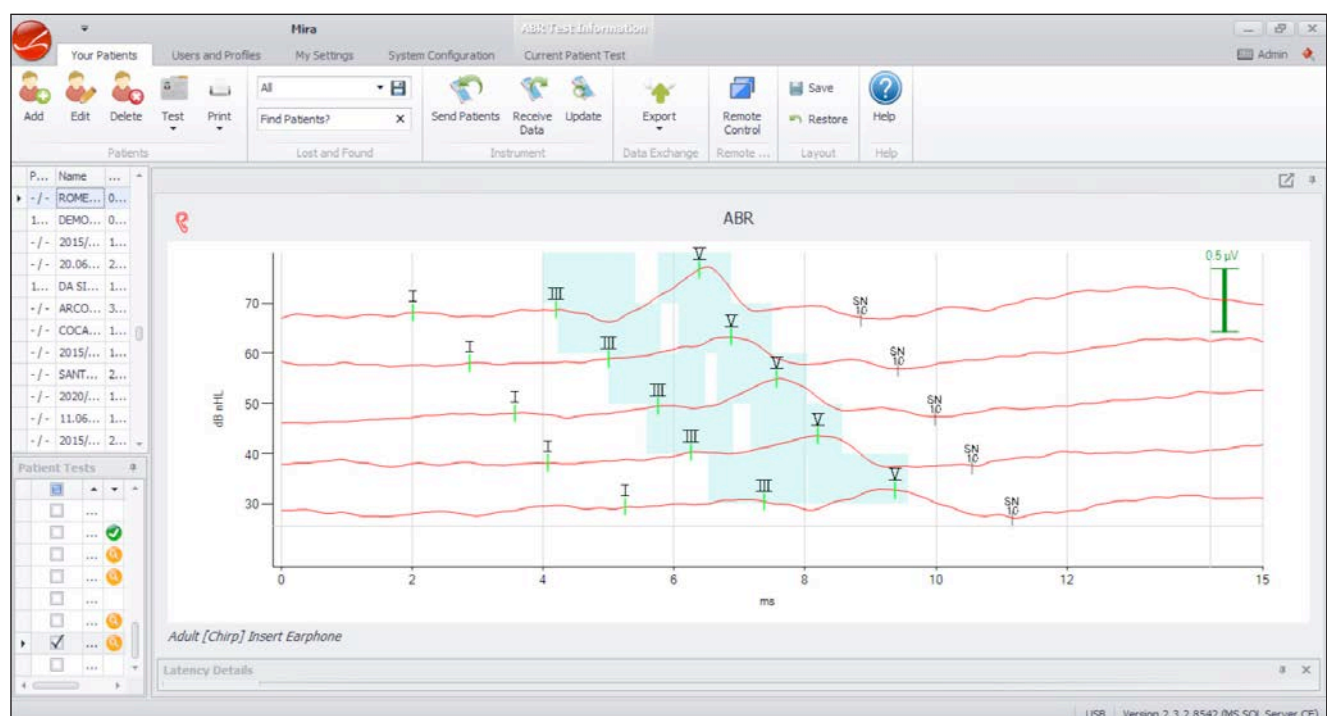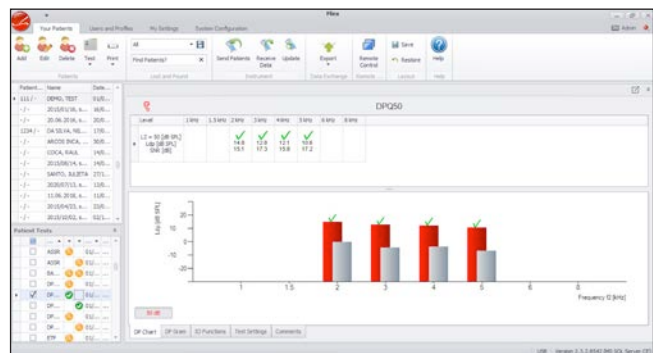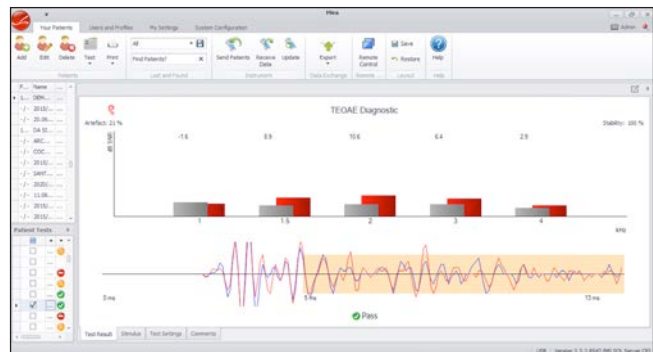

Máxima flexibilidad con opciones de soluciones para imprimir


-
- The image displays two perspectives of a compact, portable electronic scale. The top view shows the scale's white plastic housing, a large transparent weighing pan with a black interior, and a small digital LCD screen. Below the screen are two control buttons: a triangular button and a circular button. The bottom view shows the underside of the device, which is black and features a circular weighing port, a small circular button, and a larger oval-shaped button.

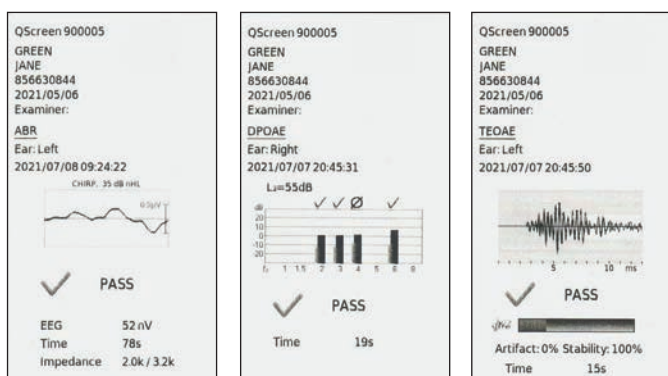

Examiner/Signature: _____

Right Left

ABR - 05/04/2016 9:01 AM - HDA 280 - #50432		ABR - 05/04/2016 9:01 AM - HDA 280 - #50432	
Stim. Type: Chirp	Stim. Polarity: Alternating	Stim. Type: Chirp	Stim. Polarity: Alternating
Stim. Rate: 40 Hz	Averages: 2084-6000	Stim. Rate: 40 Hz	Averages: 2075-6000

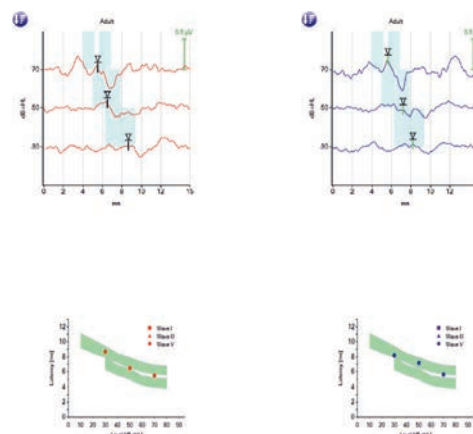


Printed on: 07/09/2021 9:10 AM - Mira 2.3.2.8542

Page 1 / 1

Conozca al equipo de PATH MEDICAL


Ventas

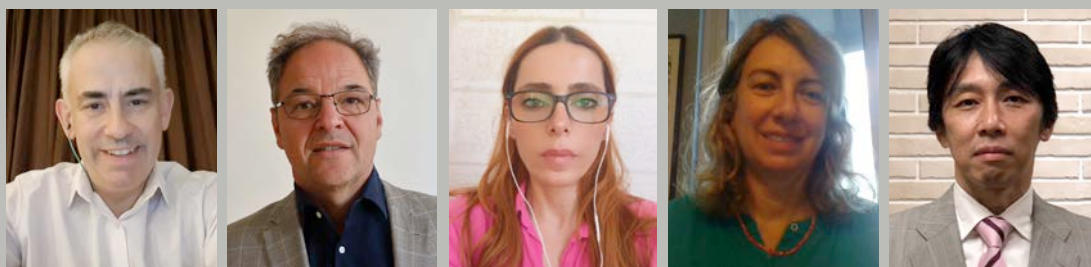

Operaciones



Desarrollo

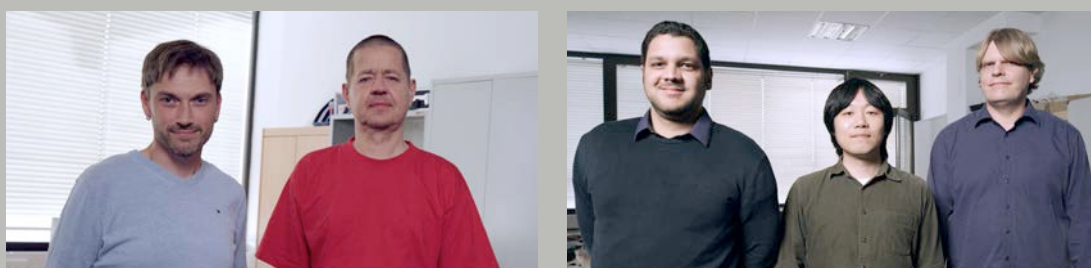

Producción



Servicio técnico



Control de calidad



Made in Germany



PATH MEDICAL GmbH
Landsberger Straße 65
82110 Germering / Alemania
Tel +49 89 800 76 502 / Fax +49 89 800 76 503
info@pathme.de / www.pathme.de